



Ratioline®



HALLUX VALGUS **NEU**

Schmerzen lassen
sich vermeiden.

**Wir machen Sie fit
für eine neue Kategorie
in Ihrer Apotheke!**

Füße sind ein sensibles Thema


Etwa jede dritte Apothekenkundin leidet an einem Hallux valgus, einer schmerzhaften Vorfußverformung mit Schiefstand des großen Zehs. Obwohl höllische Schmerzen in hohen und spitzen Schuhen ständig daran erinnern: Das Problem wird häufig verschwiegen. Zumal noch kaum jemand weiß, dass es eine effektive Lösung dafür gibt.

Jetzt können Sie einfühlsam helfen

Die neuen Hallux valgus Produkten von Ratioline können vielen Frauen immense Schmerzen ersparen und ihnen die Freude an schönen Schuhen zurückgeben. Wer Wert auf Chic am Fuß legt, spricht allerdings auch nicht gern offen über den Schönheitsmakel, den das vorstehende Großzehengelenk nun mal auch darstellt. Dabei lässt sich das mit Ratioline gut korrigieren.

**Ihre Beratung ist richtig wichtig!
Erfahren Sie hier mehr dazu.**

Woher kommt das?

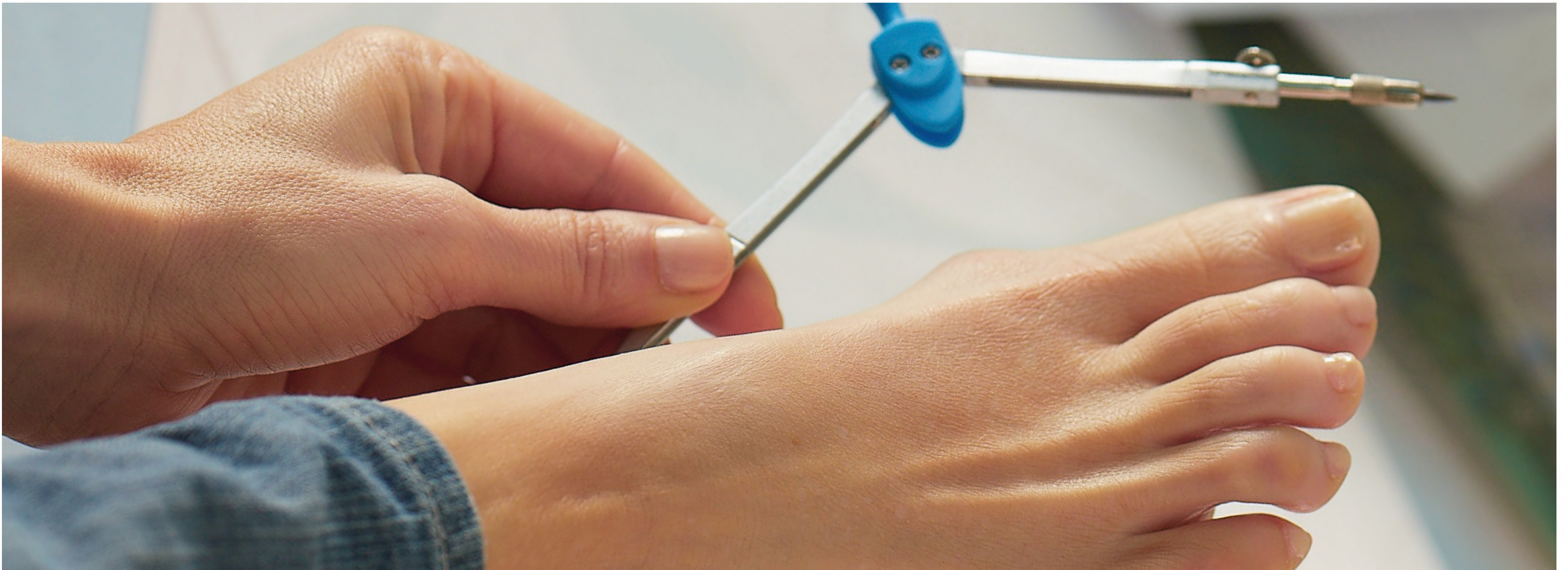

Hallux ist das lateinische Wort für Zehe. Valgus heißt schief. Hallux valgus ist eine verbreitete Volkskrankheit.

Der Grund für die Fehlstellung ist hauptsächlich in der Vererbung zu suchen. Schwaches Bindegewebe spielt dabei eine bedeutende Rolle. Auch die Lebensgewohnheiten wirken sich mit der Zeit auf den Fuß aus. Tagtäglich ist er einer mehr

oder weniger hohen mechanischen Belastung ausgesetzt. Spitze, enge und hohe Schuhe begünstigen das Fortschreiten des Krankheitsbildes, weil sie die Körperlast ungünstig auf die betroffene Stelle konzentrieren und zunehmend schädigen.

Was kann man dagegen tun?



Die Ratioline HALLUX VALGUS Bandage zur Korrektur bewirkt eine dynamische Korrektur bei jedem Schritt.

Sie ermöglicht eine fließende Anpassung an den jeweiligen Grad der Verformung und reduziert gleichzeitig Reibung und Gelenkschmerzen. Das wurde in Studien bewiesen.


Für viele eine hilfreiche Empfehlung

Wem kann geholfen werden?

Die Korrekturbandage kann verwendet werden, solange der große Zeh seitlich noch beweglich ist. Fragen Sie danach! Wenn nicht, kommt das Hallux valgus Druckschutzpolster zur Schmerzlinderung zum Einsatz.

Betroffene gibt es in allen Altersklassen und sozialen Schichten

- Berufstätige Frauen, die viel auf den Beinen sind und dabei schön angezogen sein möchten
- Mütter, die evtl. hormonbedingt eine Bindegewebsschwäche erlitten haben und aktiv für Haushalt und Familie eintreten
- Shopping- oder Dancing-Queens, die sich nicht von schmerzenden Füßen ausbremsen lassen wollen
- Ältere Damen, deren Füße die Spuren von Jahrzehnten tragen

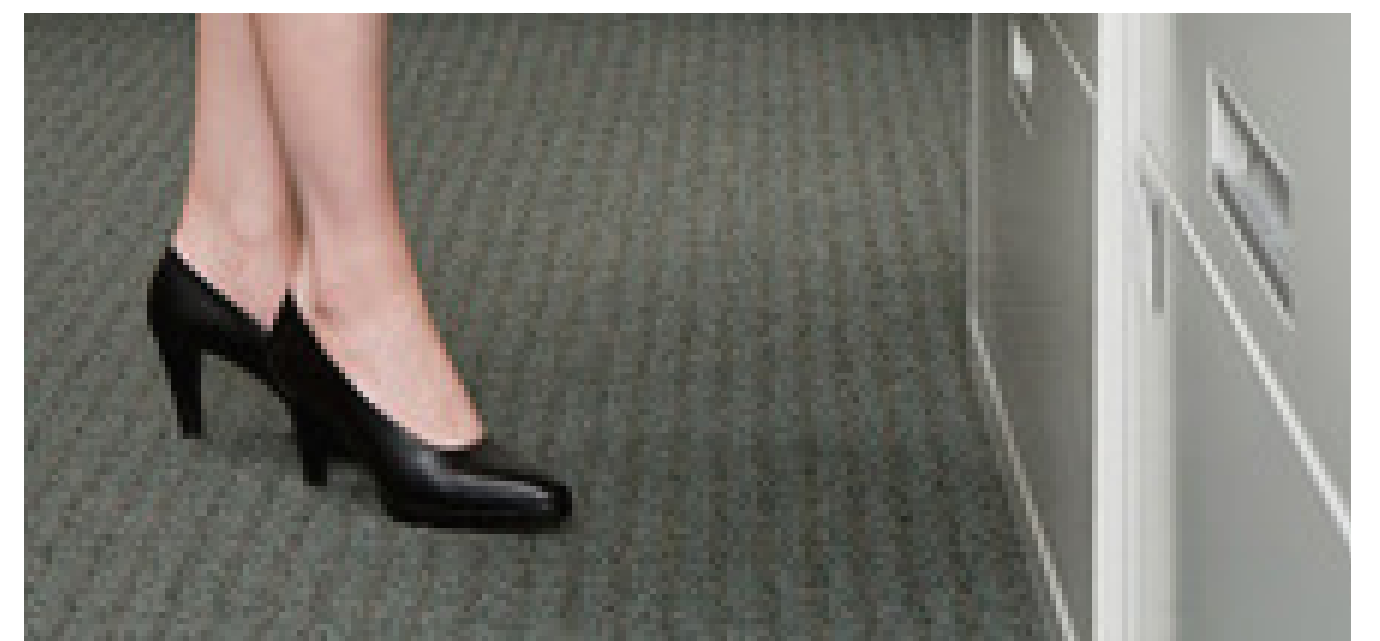

Wie spreche ich die Kundin darauf an?

Lieber nicht ins Fettnäpfchen treten: Kunden schätzen eine diskrete Ansprache und Beratung. Erst recht, wenn es um ein heikles Thema wie ihre Füße geht.

Ein indirekter Gesprächseinstieg funktioniert besser

- Verallgemeinern Sie das Problem: Loben Sie z.B. die Schuhe der Kundin und sagen dann, dass leider viele Frauen in so schönen Schuhen Beschwerden haben.
- Benutzen Sie Selbstvertreter: Berichten Sie z.B. von einer Freundin, die in so tollen Schuhen immer Schmerzen hatte, und dass Sie ihr helfen konnten.
- Bringen Sie Eigenerfahrung ein: Erzählen Sie z.B. dass Sie endlich auch wieder hohe Absätze bei der Arbeit tragen können, weil Sie etwas haben, das die Schmerzen nimmt.
- Gehen Sie mit: Viele Kundinnen werden das Gespräch indirekt weiterführen wollen – und doch direkt auf den Punkt kommen.



Ratioline®



Fakten und Empfehlungen zur neuen Kategorie **HALLUX VALGUS**

Produkte

- Bandage zur Korrektur + Druckschutzpolster
- Beide mit Druckschutz über dem vorstehenden Gelenk zur Schmerzlinderung
- Bandage zieht zusätzlich den Zeh gerader, zur Behebung der Schmerzursache
- Wirksamkeit in Studien belegt

Für wen

- In erster Linie für Frauen, die einen Hallux valgus haben und trotzdem chice Schuhe tragen möchten
- Auch für Männer, die ebenfalls an einem Hallux valgus leiden können

Wann tragen

- Den ganzen Tag über
- Bei allen Alltagsaktivitäten, vor allem wenn man lange auf den Füßen ist, daheim und unterwegs
- Am besten gleich morgens anziehen, schon bevor die ersten Schmerzen auftreten
- Eine Korrektur ist nur möglich, solange der große Zeh noch bewegt werden kann. Erst danach auf das Druckschutzpolster zurückgreifen.

Vorteile

- In „normalen“ Schuhen zu tragen
- Dünn, erzeugt daher keinen zusätzlichen Druck
- Schützt auch vor unangenehmer Reibung
- Waschbar

Ihre hilfreiche Empfehlung für alle
die unter Hallux valgus Schmerzen leiden.





Ratioline®



HALLUX VALGUS **NEU**

Endlich eine
effektive Lösung.

Wir machen Sie fit!

Füße sind ein sensibles Thema

Etwa jede dritte Kundin in Ihrer Apotheke leidet an einem Hallux, Valgus, einer schmerzhaften Vorfußverformung mit Schiefstand des großen Zehs. Obwohl höllische Schmerzen in hohen und spitzen Schuhen ständig daran erinnern: Das Problem wird häufig verschwiegen und verdrängt. Zumal es bisher auch keine einfache, effektive Lösung dafür gab.

Jetzt können Sie einfühlsam helfen

Die neuen HALLUX VALGUS Produkten von Ratioline können Frauen von ständigen Schmerzen befreien und ihnen die Freude an schönen Schuhen zurückgeben. Wer Wert auf Chic am Fuß legt, spricht allerdings auch nicht gern offen über den Schönheitsmakel, den das vorstehende Großzehengelenk nun mal auch darstellt. Dabei lässt sich das mit Ratioline gut korrigieren.

Ihre Kundenansprache ist richtig wichtig! Erfahren Sie hier mehr dazu.